

## AS01 - Übertragen von Benutzereinstellungen

Gelegentlich kann es sein, dass Sie die benutzerspezifischen Einstellungen von LogTag<sup>®</sup> Analyzer auf einen anderen PC übertragen oder zu einem anderen Benutzer kopieren möchten. Dieser Abschnitt erklärt, was dazu getan werden muss.

### Einstellungen zu einem anderen Benutzer auf dem gleichen PC kopieren

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellungen von Benutzer 1 zum Benutzer 2 auf dem gleichen PC übertragen werden können.

1. Melden Sie sich am Computer als Benutzer 1 an. Wenn die LogTag<sup>®</sup> Analyzer Software gerade läuft, beenden Sie sie bitte. Dies stellt sicher, dass alle ausstehenden Änderungen in die Einstellungsdatei abgespeichert werden.
2. Starten Sie LogTag<sup>®</sup> Analyzer neu und klicken Sie auf **Optionen** im Menü **Bearbeiten**. Klicken Sie auf **Exportieren** und aktivieren Sie das **Alle auswählen** Kontrollkästchen.
3. Klicken Sie auf Exportieren, geben Sie einen Namen für die Exportdatei ein und speichern Sie die Datei in einem Ordner, der für alle Benutzer zugänglich ist. Der Ordner Öffentliche Dokumente ist hierfür gut geeignet.

Es kann sein, dass Sie die so erstellte Datei jetzt noch bearbeiten müssen. Wenn Ihr Administrator die Software korrekt eingerichtet hat, stehen alle Pfadnamen und Verzeichnisse, auf die LogTag<sup>®</sup> Analyzer zugreift korrekt zur Verfügung, auch nach Übertragung der Einstellungen. Dazu müssen Pfadnamen und Verzeichnisse auf allgemeine zugängliche Netzwerkstandorte eingestellt oder aber Systemvariablen benutzt worden sein.


Wenn die Exportdatei jedoch Pfadnamen mit Ihrem Benutzernamen enthält, muss die Datei bearbeitet werden. Insbesondere müssen folgende Pfadnamen überprüft werden:

- <log\_folder> in <smtp\_settings>
- <log\_folder> in <ftp\_settings>
- <folder> in <file\_folder\_settings>
- <log\_folder> in <configuration\_logs\_settings>

Sie können auch zusätzliche Einstellungen hinzuzufügen, oder nicht benötigte Einstellungen entfernen. Eine detaillierte Beschreibung aller verfügbaren Einstellungen finden Sie im LogTag<sup>®</sup> Analyzer Network Administrator Guide.

Diese Methode überträgt auch alle vorhandenen Konfigurationsprofile.

4. Melden Sie den Benutzer 1 ab und wechseln Sie zu Benutzer 2. Starten Sie LogTag<sup>®</sup> Analyzer und klicken Sie auf **Optionen** im Menü **Bearbeiten**. Klicken Sie auf **Importieren...** und navigieren Sie zum Ordner mit der gespeicherten Exportdatei. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf **Ok**.
5. Wenn der Import erfolgreich durchgeführt wurde, wird eine Meldung ähnlich der folgenden angezeigt:

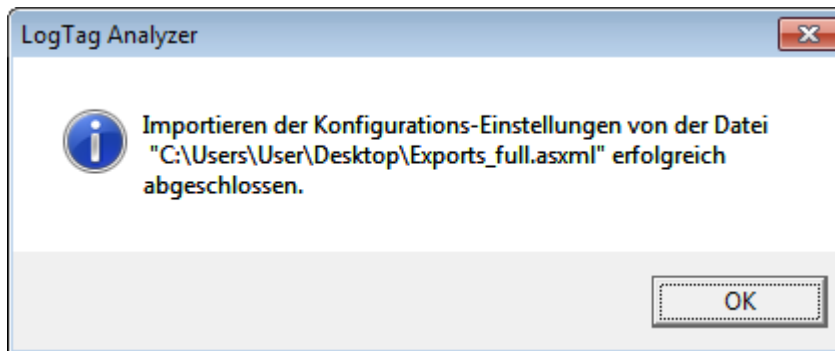

Benutzer 2 verwendet jetzt die gleichen Einstellungen wie Benutzer 1. Bitte beachten Sie, dass von diesem Zeitpunkt an die Einstellungen der beiden Benutzer wieder unabhängig voneinander sind.

Sie können auch Standardeinstellungen für den PC einrichten, die für jeden neuen Benutzer automatisch beim ersten Programmstart zur Verfügung gestellt werden. Informationen dazu finden Sie im LogTag<sup>®</sup> Analyzer Network Administrator Guide.

## Daten auf einem anderen PC übertragen

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Einstellungen von einem PC auf einen anderen PC kopiert werden können.

1. Erstellen Sie auf dem PC, der die zu übertragenden LogTag<sup>®</sup> Analyzer Einstellungen enthält, eine Exportdatei, wie im vorherigen Abschnitt unter den Schritten 1 bis 3 beschrieben.
2. Speichern Sie die Datei in einem Ordner, auf den Sie vom anderen PC aus zugreifen können. Dazu eignet sich ein allgemein zugänglicher Ordner im Netzwerk oder ein USB Stick.

Sie können auch hier wieder die Datei bearbeiten, was insbesondere dann nötig ist, wenn für den neuen PC nicht die gleiche Ordnerstruktur verwendet wird.

3. Installieren und starten Sie nun LogTag<sup>®</sup> Analyzer auf dem anderen PC. Klicken Sie auf **Optionen** im Menü **Bearbeiten**. Klicken Sie auf **Importieren ...** und navi-

gieren Sie zum Ordner mit der gespeicherten Exportdatei, also zum Beispiel zum Memory-Stick. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf **Ok**.

Die Einstellungen sind nun übertragen worden, allerdings gelten folgende Ausnahmen:

- Alle Einstellungen, die über die Registry vorgenommen wurden, müssen auf dem neuen Computer erneut eingegeben werden.
- Die Liste der **Zuletzt verwendeten Dateien** wird nicht übertragen.

Je nach Anforderungen wird Ihr Netzwerkadministrator die entsprechenden Registrierungsschlüssel auf den neuen Computer kopieren.